

酒造用原料米全国統一分析法

平成8年10月15日

酒米研究会

酒造用原料米全国統一分析法

昭和51年10月21日制 定
昭和52年10月27日一部改正
昭和55年 8月29日一部改正
平成 6年 9月30日一部改正
平成 8年10月15日一部改正

1. 試料の粉碎

バイブレーションサンプルミル¹⁾を用い、容器(アルミナ製)1個当たり約10gの試料を入れ、5分間処理し、粉碎試料²⁾は直ちに小容器のガラスあるいは樹脂容器に入れ、密封する³⁾。

1) 粉碎機はアドバンテック製 T1-100 型を用いる。アルミナ製容器に試料を入れ密封して振動粉碎するので、水分の揮散、成分変化がほとんどなく均質な粉体にすることができる。

2) 試料は「2. 水分」、「9. 粗タンパク質」、「10. カリウム」の試験に用いる。

3) 粉碎直後は発熱しており、直ちに空間が少ない密閉容器に移し水分の揮散を防ぐ。

2. 水分¹⁾

粉碎試料約2gをフタ付秤量器²⁾(直径50mm, 深さ25mm)に精秤し³⁾135 で3時間乾燥し、デシケーター中で放冷し⁴⁾、次式によって水分%を算出する。

$$\text{水分(\%)} = \frac{a - b}{a} \times 100$$

但し、aは乾燥前の試料重量、bは乾燥後の試料重量である。

1) 水分定量法は乾燥法、蒸留法、化学的方法、電気的方法等に大別され、乾燥法も減圧加熱乾燥法、常圧105 法、常圧135 法等にわかれている。穀物類の水分定量では、減圧法(25mmHg, 98~100)が標準方法となっているが、測定に20~30時間を要するので、本分析法では上述の定量法を採用した。この方法は所要時間が短かくて済み、再現性も良く、又標準法とほとんど同じ数値を与えることが知られている(永原・堤, 1959)。

2) フタ付秤量器はアルミ製が望ましい。直径が大きいのは早く乾燥させるためである。秤量器はあらかじめ同じ条件で乾燥して恒量の重量を測定しておく。

3) 2g 前後の試料を直視天秤あるいは電子天秤等で小数点以下 4 桁の精度まで、できるだけ $2.0 \pm 0.1\text{g}$ の範囲で精秤する。

4) この乾燥法で減少した重量がすべて水分であるのではなく、標準法による水分値と同じ値が得られるような条件を実験的に定めたのであるから、乾燥温度、時間を正確に守ることが必要である。乾燥器は室内の温度分布を均一にするため通風機能が付いたものがよい。そうでない場合は、温度分布の不均一による誤差を無くするため秤量器の下にアルミ箔を敷くなどの配慮が必要である。

なお、乾燥器中では秤量器のフタをずらしておかねばならない。デシケーター中の放冷時間は、30～60分とする。

3. 玄米の水分調整¹⁾

玄米試料の水分を「2. 水分」により測定する。

試料 250g～1kg を 2 重にした紙袋²⁾ (重量精秤済み) に入れて密封し³⁾、全体の重量を精秤した後 (1)～(3) いずれかの方法で処理し、随時秤量して試料水分 13.8%⁴⁾ になるように調整し⁵⁾ (許容範囲は $\pm 0.2\%$ とする。), 中フタ付きポリエチレン容器に入れて密封し、10 で 7 日間貯蔵⁶⁾ したものを試料とする⁷⁾。

(1) 試料水分が 13.8% より大きい場合

20～25 の乾燥した室に袋どうしが重ならないように間隔を取って放置する⁸⁾。

(2) 放置により試料の重量が増加する場合、又は水分の減少率が 0.5% / 日以下の場合シリカゲル・真空デシケーター中に放置する⁹⁾。

(3) 試料水分が 13.8% 以下で、吸湿させる必要がある場合

デシケーターに 60 前後の温湯を入れ、凝縮水が試料中に浸透しないように紙、布などで覆ってデシケーター中に放置する¹⁰⁾。

白米試料の水分調整も同様に行い、13.5% とする。以下の分析は、水分調整を行った試料を用いる。

1) 「5. 精米」の試験ではテストミルを用いるが、この方法は少量の玄米のため実際の精米とは異なり、15 分前後の短い精米時間で精米が終了する。この結果、精米中に玄米から揮散する水分は少量に留まり、検査規格の玄米 (水分 15%) では酒造現場で原料として取り扱う白米より水分が多くなる。白米水分と 120 分吸水率 (「7. 吸水性」で 120 分浸漬後に求められる) には密接な関係があり、白米水分 1% で吸水率が 3% 変動する、すなわち白米水分が 1% 多くなれば吸水率は 3% 低くなり、この逆も成立する。吸水率は「8. 消化

性」で求められる蒸米吸水率に影響し、蒸米吸水率の高低は「8. 消化性」の試験で求められる消化性の高低にも影響する（蒸米吸水率が低くなる、いわゆる蒸米が硬くなれば消化性は低くなる）、すなわち同一ロットの白米であっても水分が異なれば吸水性、消化性が変わり酒造適性に関わる分析データの比較が無意味になる。又、玄米の水分は精米時間あるいは砕米率、無効精米歩合に影響が大きいので、水分を同一にする必要がある。したがって、玄米で入手した試料は、玄米で水分調整を行った後に以後の操作を行わなければならない。以上の理由から、玄米あるいは白米の水分を調整して一定水分にし、同じ土俵で試験を行わなければならない。

2) 通常、台所の生ごみを処理する水に強く、水はけの良い紙袋、商品名「ダスポン」を用いる。しかし、米を乾燥したり、加湿することが出来る条件であれば何でもよい。

3) 輪ゴムで開口部を閉じればよい。

4) 精米の試験で用いるテストミルで精米歩合 70%まで精米すると、精米中に揮散する水分は 0.3~0.5%程度に留まる。醸造試験所で精米歩合 75%の白米を全国の酒造場から収集し水分と吸水率を分析した結果、平均水分は 13.5%、平均吸水率は 28.0%になることが明らかになった。しかし、検全規格の玄米（水分 15%）をテストミルで精米歩合 70%まで精米すると白米水分は 14.7%程度になり、酒造現場とは一致しない。そこで玄米水分を 13.8%に調整した後、テストミルで精米し水分 13.5%の白米試料を得ることにしたのである。

5) 試料の水分が 13.8%（白米の場合は 13.5%）を基準に、その差が大きく開いていればいるほど調整に時間がかかる。

水分の調整は以下の計算式に従って、調整後の試料重量 X を（風袋を除く）算出し、X の値の重量まで試料を乾燥あるいは加湿すればよい。

$$(100 \cdot H) a$$

$$X (g) =$$

$$b$$

a : 調整開始時の試料重量（風袋を除く）

H (%) : 調整開始時の試料水分

b : 係数 玄米の時 86.2 白米の時 86.5

6) 試料の変質を防ぐため 10 前後にし、試料の水分の安定化を計る目的で 1 週間前後貯蔵（枯らし）してから試験する。

7) 確認のため、水分調整後の試料についても水分を実測すること。

8) 扇風機で風を送ると効果的である。

9) 通風乾燥機中に 25 程度で 放置すれば、容易に水分を減少させることができる。

10) 恒湿・恒温器中で相対湿度を高め放置すれば、容易に水分を減少させることができる。

4. 千粒重¹⁾

試料より選別した整粒²⁾の粒数を数え³⁾次式により算出する。

なお、千粒重の測定は水分調整後の米について行い、計算により水分調整前の千粒重を求める。

$$\text{千粒重 (g)} = \frac{\text{整粒 g 数}}{\text{整粒粒数}} \times 1000$$

1) 千粒重は米粒千粒の重量 (g) で、米粒の充実度 (粒張り) を現わす指標として重要である。又、これは品種特性としても重要な意義を持っている。

千粒重を算出するには、米粒千粒を数えその重量を量って算出する方法と、一定重量 (約 20~30g) の米粒を先に秤取し、その粒数を数え、計算により算出する方法との 2 つがある。本法では次の理由により により行う。米粒の平衡湿度は約 70% であるため普通の室内で第 3 図粒穀計算器は乾燥又は吸湿のいずれかとなり、重量が変化しやすい。したがって の方法では誤差が大きくなるおそれがある。もちろん の場合でも砕粒を選別して重量を量りこれを差引かねばならないが、これは短時間で済み量的にも少ないことから、乾燥又は吸湿による重量の変化は無視してもよい。

千粒重の他に砕粒のみを除いた全粒数で分析する全粒千粒重とがある。品種特性を知るため、あるいは真精米歩合を計算するためには、整粒のみによる千粒重がよい。しかし玄米の充実度を評価するには、全粒千粒重の方がより有用である。

2) 整粒の判定は、国税庁所定分析法 202-3 によることとする。

3) 千粒重を測定するには、穀粒計数板を使用するのが便利である。

5. 精米¹⁾

テストミル (装てんロール 46, ストレーナーはホール状)²⁾ を 1000rpm にあらかじめ回転させておき³⁾, 玄米試料約 150g を入れ⁴⁾, 見かけ精米歩合 70% を目標に精米する⁵⁾。出来上がりの精米歩合の許容範囲は, $70 \pm 1\%$ 以内である。精米後試料をふるい⁶⁾ で軽く振って除こう (糠) し, 中フタ付き樹脂容器に密栓して 10 前後に最低一週間保存し⁷⁾, 分析を 3 週間以内⁸⁾ に行う。

なお、続いて精米を行う場合は、精米機のロールの糠を取り除くと共にストレーナーの目に詰まった砕米も丁寧に取り除く⁹⁾。

1) 試験に必要な白米量を得るのに、特に失敗がなければ各分析を 2 連で行っても 1 回で充

分な量（約 105g）が得られる。

2) テストミルは佐竹製作所製を用い， 46 のロールに統一して精米する。テストミルでは 50g ~ 200g の範囲の玄米を精米できるが，量が少なくなる方が目的精米歩合になるまでの精米時間を要する。したがって，精米試験を行うときは，初発の玄米量を同じにする必要がある。また，短時間で精米が終わるなど，実際の精米とは異なることを考えておく必要がある。ストレナーのメッシュは，通常だとスリット式のものが付いてくるので，発注する際にホールを指定する。スリットだと碎米が極端に多くなる。

3) 精米中に摩擦熱でテストミル自体の温度が上がってくると，同一ロットの玄米でも精米時間が短くなるので，テストミルの温度条件を調整するために，あらかじめ不要の米を入れて，30 分間回転させておく。ロールの回転数を 1000rpm にしたのは，少量の精米で無理がかからずできるだけ現場に近い回転線速度に近づけるためである。

4) 試料は，精米に先立って常温に戻しておく。

5) コンピュータ制御による自動精米機では，ロードセルにより白米重量を測定しながら精米歩合を管理するが，通常の精米ではぬか重量を計算しながら目標の精米歩合にする。テストミルでは構造上，また少量であるため白米重量で目標精米歩合にするが，精米時間（通常 10 ~ 15 分）の予測がつかないため途中で精米を止め，白米を取り出してその時の精米歩合と精米時間の関係から目標の精米歩合までに要する時間をはじき出し再度精米を続ける。しかし，精米途中で白米を抜き出すと温度が下がり，再び精米機中に投入した際に碎米が発生するため，天秤を精米機のそばに置いておくなど出来るだけ手早く重量を測定する。その間，精米機の回転は止めない。

6) 通常，精米機のぬかをふるい分ける「まんごく」の目は 2 ~ 3mm 程度なので，14 メッシュのふるいを用いる。

7) 精米により生じた試料水分の変動を均一にする。

8) 白米の米質が変化を来さない範囲で，できるだけ速やかに試験する。

9) 碎米が抵抗片となり，碎米増加の原因となる。また，連続して精米を行うとロール温度がさらに上昇し白米の水分を減少させ碎米が増加する。このため，同じ試料でも精米時間が短くなってくる。しかし，この操作により，ロールの温度を若干低下させ精米開始時の温度を一定に保つ効果が有り，再現性の良い精米を行うことが出来る。

6 . 真精米歩合，碎米率，無効精米歩合

(1) 真精米歩合¹⁾ 玄米とその玄米を精米して得た白米の千粒重²⁾より次式により真精米歩合を算出する。なお，千粒重の計算には，水分調整後の玄米千粒重を用いる。

$$\text{真精米歩合}(\%) = \frac{\text{白米千粒重}(\text{g})}{\text{玄米千粒重}(\text{g})} \times 100$$

(2)碎米率³⁾ 「4.千粒重」に準じ、精白米の「試料採取重量」から「整粒重量」(「胴割れ粒重量」を含む。)を減じたものを「碎米重量」とし、次式により碎粒率を算出する。

$$\text{碎米率}(\%) = \frac{\text{試料採取重量}(\text{g}) - \text{整粒重量}(\text{g})}{\text{試料採取重量}(\text{g})} \times 100$$

(3)無効精米歩合⁴⁾ 次式により無効精米歩合を算出する。

$$\text{無効精米歩合}(\%) = \text{真精米歩合}(\%) \cdot \text{見かけ精米歩合}(\%)$$

1) 通常の精米歩合は、見掛け精米歩合をいう。しかし、碎米の混入率が異なれば見掛け精米歩合が同じ数値であっても精米の程度は同じではない。そこでより正確な精米の程度を表すために真精米歩合を用いる。

2) 玄米と白米の千粒重は同一水分(13.5%)に換算して用いる。

3) 精白米における胴割れ米は整粒に含めることとする。(醸造用玄米の検査規格では胴割れ米は精米歩留まりに影響を与えるため整粒から除かれるが、精白米となったものについてはそのまま製造に用いるため整粒に含めることとする。)(「第4回改正国税庁所定分析法注解」((財)日本醸造協会発行)の原料米の項(202)の表2「原料米分析結果の一例」(143頁)を参照のこと。)なお、この碎米率には未熟粒等も含まれることとなる。

4) 一般に真精米歩合の方が数値は大きく、この値より見掛け精米歩合を引いた値を無効精米歩合といい、精米の巧拙を判定する一つの指標となる。精米歩合が低くなれば、無効精米歩合の許容範囲は大きくなる。

7. 吸水性¹⁾

試料 10g²⁾を精秤し、あらかじめ重量を測った浸漬管³⁾にとり、15 の水 60~100ml に浸漬し⁴⁾、15 で 20 分間及び 120 分間放置後⁵⁾、直ちに浸漬管ごと遠心分離器を用いて $\text{RCF} \times t^6) = 2,500 \sim 3,000\text{gt}$ (1,500rpm 以上にする)で遠心分離した後直ちに精秤し⁷⁾、次式により吸水率(%)を求める。

$$\text{吸水率}(\%) = \frac{a - b}{b} \times 100$$

a: 遠心分離後の試料の重量 g 数 b: 採取試料 g 数 t: 回転時間(分)

(注) 1. 遠心分離器, ローター, $\text{RCF} \times t$ を付記する。

2. RCF (遠心力) は次式により計算する。

$$\text{RCF}(\text{g}) = 1.118 \times R \times 10^{-5} \times N^2$$

但し，R は回転半径 (cm)，N は回転数 (rpm) とする。

1) 白米の吸水性は，浸漬時の吸水速度と最大吸水量の 2 者で示す。吸水速度は 20 分間浸漬後の吸水率，最大吸水量は 120 分間浸漬後の吸水率とする。白米水分は約 13.5% 前後であるので，最大吸水量に米の品種による大きな開きはないが，吸水速度は米の品種間で大きな開きがある。一般に，吸水速度は酒造好適米が大きい。吸水速度は酒造適性の指標として重要である。

2) 10g (±0.5g) を小数点以下 4 桁程度の精度で電子天秤あるいは直示天秤で精秤する。

3) 正確な吸水率を求めるには再現性のある水切りが重要である。水切りを一定条件で行うため，底部に穴をあけた，ステンレス製浸漬管を用い，これに合わせた遠心管に浸漬管を入れ遠心力により水切りする。

4) 水温によって白米の吸水速度は変化する。したがって，浸漬水温を 15 と一定にし，浸漬中の温度変化がないように注意する。浸漬時間は白米の浸漬開始から水切りのための遠心分離開始までの時間とする。通常は 15 の循環式恒温水槽に試料が十分浸る程度の 15 の水を入れた 100ml 容ビーカーを置き，この中に試料を入れた浸漬管を浸す。浸漬開始時，浮遊する米粒がないように試料が完全に水中に浸るのを確認する。

5) 放置 (浸漬) 時間は，試料を水に浸漬してから遠心機のスイッチを入れるまでの時間である。20 分の場合は，バランスを取る時間も考慮して操作するなど特に注意を要する。

6) なるべく，遠心力は回転数が 3,000rpm 程度，回転時間は 3~5 分程度になるような条件にする。

7) 2) と同じ精度で精秤する。

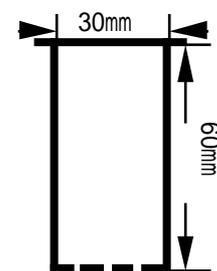


図 ステンレス製浸漬管

8 . 消化性¹⁾ (蒸米吸水率，Brix 度，フォルモール態窒素)

(1) 試薬

・ M / 10 コハク酸緩衝液

A M / 10 コハク酸溶液

コハク酸 11.8g を水に溶かして 1L とする。

B M / 10 コハク酸ナトリウム溶液

コハク酸ナトリウム ($\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 27.0g を水に溶かして 1L とする。

A 及び B 液をまぜて pH4.3 に調整する。

・酵素緩衝液²⁾

M / 10 コハク酸緩衝液に α-アミラーゼを 60 単位 / ml になるように溶解する。(この場合プロテアーゼ力価として 3,000 単位 / ml を含んでいること)⁴⁾

・トルエン

(2) 試験操作

試料 10 g を金網かご⁴⁾に入れ、掌に軽く打ちつけ除糠する。⁵⁾

金網かごに入れたまま、15℃で 15~20 時間、十分に浸漬する。

金網かごに入れたまま、遠心機により RCF × t = 500gt で脱水⁶⁾する。

脱水後、かごのまま甑を用いて 45 分間蒸きょうする。⁷⁾

甑からかごのまま蒸米を取り出し、風の無いところで軽く手を入れ荒息を抜いた後⁸⁾、25℃まで放冷し⁹⁾、直ちにかごから蒸米を取り出し、二重にしたチャック付きポリ袋に密封した状態で¹⁰⁾、15℃で放置する。

蒸上がりから通算して、3 時間後に蒸米吸水率を測定する¹¹⁾。蒸米吸水率は次式により求める。

$$\text{蒸米吸水率 (\%)} = \frac{(\text{蒸米重量(g)} - \text{白米重量(g)})}{\text{白米重量(g)}} \times 100$$

蒸米全量を、50ml の酵素緩衝液 (pH4.3 の 1/10M コハク酸緩衝液、α-Amylase60U / ml を含む。) に投入する¹²⁾。防腐剤として 0.5ml のトルエンを加え、10 秒間激しく振盪した後、15℃で 24 時間静置して消化を行う。消化液をろ過 (もしくは遠心) してろ液を得、ろ液について Brix 度¹³⁾ 及びフォルモール態窒素¹⁴⁾ を測定する。

なお、酵素緩衝液のみを同様に処理し、その値をブランク値として求め、試料の値からその値を差し引く。

1) 一定条件で調整した蒸米試料の「蒸米吸水率」と、この蒸米を α-アミラーゼを含む (pH4.3 清酒もろみと同じ条件) のコハク酸緩衝液中で、15℃で 24 時間糖化し、そのろ液の「Brix 度」と「フォルモール態窒素」を測定し消化性とする。

2) 通常、酵素剤としては天野製薬製ペプチダーゼ R を用いる。あらかじめ酵素剤の α-アミラーゼの力価を測定し、60u / ml になるように 0.1M, pH4.3 コハク酸緩衝液に溶かして使用する。酒米研究会では、同一年度に分析する場合は同一ロットの酵素剤を用いるようにしている。ペプチダーゼ R は麴あるいは醸造用酵素剤と比較して、酸性プロテアーゼ、酸性カルボキシペプチダーゼの力価が高く、しかも α-アミラーゼの力価に対する同酵素力価の比率も高いため、糖化液中のフォルモール窒素の値が大きくなり、試料間の差異が明確になる。

3) 清酒醸造では、α-アミラーゼ力価が 60U / ml の時、プロテアーゼ力価が 3,000U / ml

9. 粗タンパク質¹⁾

(1) 試薬

- ・ 分解用触媒²⁾

硫酸銅，硫酸カリウム及びセレン（重量比 1 : 8.9 : 0.1）をませ，あらく砕く。

- ・ 濃硫酸水酸化ナトリウム飽和溶液
- ・ N / 50 水酸化ナトリウム溶液

N / 10 水酸化ナトリウム溶液を 5 倍に希釈する。力価を F とする。

- ・ N / 50 硫酸

濃硫酸 0.6ml を 1L 容メスフラスコにとり，水を加えて全量を 1L とする。この液 10ml をとりブランスウィック指示薬を用いて N / 50 水酸化ナトリウム溶液で滴定し，その ml 数を a とする。

- ・ ブランスウィック指示薬³⁾

メチル・レッド 0.2g 及びメチレン・ブルー 0.1g を 95% (V/v) アルコール 200ml に溶解する。

(2) 試験操作

粉碎試料約 0.5g⁴⁾ を精秤して分解びん⁵⁾ にとり，濃硫酸 10ml 及び分解用触媒約 1g を加えて，時々沸騰する程度に加熱し，内容が無色になるまで続ける⁶⁾。分解終了後冷却し少量の水で希釈した後，100ml 容メスフラスコに移し，更に水を加えて全量を 100ml とする。

その 10ml を窒素蒸留装置にとる。（Parnas Wagner の装置を使用する）受器中に N / 50 硫酸 10ml 及びブランスウィック指示薬 2~3 滴を入れて冷却管に接続した後，蒸留器中の硫酸分解液に飽和水酸化ナトリウム溶液を加えて強アルカリ性とし，水蒸気蒸留する⁷⁾。

留液が約 40ml となったならば受器を冷却管からはずし，更に数 ml 留液をとり，冷却管の先端に付着している留液を受器中に洗いこみ，N / 50 水酸化ナトリウム溶液で緑色になるまで逆滴定する⁸⁾。

その滴定 ml 数を b とし，試料白米水分を w% とすれば，次式により粗タンパク質量は次式により乾物換算して求められる⁸⁾。

$$\text{粗タンパク質 (\%)} = \frac{(a-b) \times F \times 0.28 \times 5.95}{\text{試料 g 数}} \times \frac{100}{(100-w)}$$

（注）なお，本法の他に，分解方法を過酸化水素で行い，生じたアンモニアをインド・フェノール法により比色定量する方法や，自動化した方法などもあるが，これらの方法を用いた場合はその旨を報告に記載すること。

1) この定量法は発明者の名をとってケルダール (Kjeldahl) 法と呼ばれている。得られたタンパク質中にはタンパク態窒素の他、アンモニア態、アミド態、プリン態等の非タンパク態窒素が入っているので、係数を乗じて得られた数値は粗タンパク質と呼ばれている。

2) セレンは、分解を早めるため 1% 添加する。

3) 中和滴定の際 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ が存在すると指示薬の中和点の変動して誤差を生じることが知られている。本指示薬はこの塩類誤差がもっとも小さい。

4) ケルダール法にはマクロ法、ミクロ法等があるが、本法はセミミクロ法である。粗脂肪と異なって、粗タンパク質量は玄米でも白米でも大きな差がないから、どの場合も試料は 0.5g でよい。

5) 分解びんは 30 ~ 50ml 容の小型のものを用いる。

6) 加熱は最初は小さい炎で行う。まず炭素が遊離して黒くなり、はじめ泡が立つが次第に出なくなるからだんだん火を強くする。反応が進行するにつれて液は茶かっ色から淡青の透明液となる。もし分解びんのけい部に試料が付着していたら、びんを傾けて硫酸で洗い落とす。それでも取れないときは、分解液を室温まで放冷した後、洗浄びんの水で試料を洗い落とし、これがすっかり分解されるまで、更に加熱を続ける。分解はドラフトで行う。

7) 蒸留は図に示すような Parnas Wagner の蒸留装置を用いて次の順序で行う。

(1) 安全管 A 及びコック A' を備えた 1L フラスコ B に硫酸酸性 (ごく薄くてよい。指示薬を 4 ~ 5 滴入れて、常に酸性であることを確かめておく) の水を入れ加熱沸騰させる。これは蒸気発生装置 C である。このときコック A, C, D は開き、又、F は閉じておく。このフラスコには、突沸防止のため亜鉛の小塊を 2 ~ 3 こ入れておくことよい。

(2) 200ml 容三角フラスコ K に N / 50 硫酸溶液 10ml, ブランスウィック指示籠 2 ~ 3 滴を入れて、冷却管 J の下端が硫酸液中に浸るようにおく。

(3) 希釈した分解液 10ml をロート G から蒸留フラスコ I に入れる。I は二重壁でその間は断熱のため真空になっている。ロート G を少量の水で洗った後、飽和水酸化ナトリウム (6ml で十分である) を G から I に入れ分解液を強アルカリ性にする。終わったらコック H を閉じる。

(4) コック A, D を閉じ F を開くと蒸気は I に入り内容液は沸騰するようになる。発生したアンモニアはガスのままか、アンモニア水となって、冷却管を通して受器に至り硫酸液に捕集される。

(5) 留液がだいたい 40ml になったら K を J の先端から離し、更に数 ml の留液をとり、なお洗浄びんの水で管の外側についている留液を洗い込む。

(6) K を J から完全に離れた後、B の加熱をやめるか、コック A' を開き C を閉じると、I の内容液は逆流して蒸気だめ E に入るから、コック D を開けて排出する。G から水を入れて I の中を一度水洗いし、その水は同様に捨てる。

(7) 以上の手順を誤ると、I の中の分解液が E に逆流したり、K の中の硫酸液が I に逆流

したりするから，注意が肝要である。

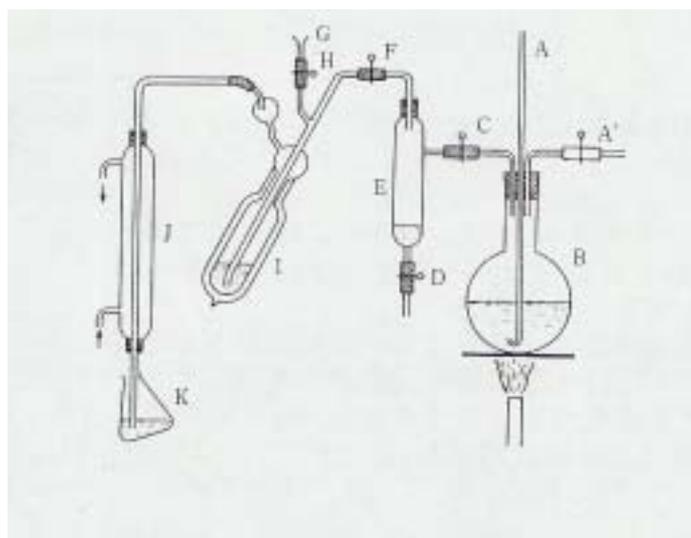


図 Parnas-Wagner の窒素蒸留装置

8) ブランスウィック指示薬は pH5.2 で赤紫，5.4 で灰色，5.6 で緑色で，変色点における色の変化がはっきりして見やすい。滴定の終点は液が緑色になったところである。

9) この式は次のようにして導かれたものである。

$$N / 50 \text{ 水酸化ナトリウム } 1 \text{ ml} = 0.28 \text{ mgN} (= 14 \text{ g} \times 1 / 50 \times 1 / 1,000)$$

$(a \cdot b) \times F \times 0.28 \text{ (mg)}$...この N / 50 水酸化ナトリウム (a·b) ml に相当する N 量これは分解液 10ml 分であるから 100ml ではこの 10 倍の N 量，これに 5.95 を乗じたものが粗タンパク質量 (mg) で，これが試料中の量であるから，試料 100g 中の粗タンパク質量 (%) は上式のとおりとなる。

10 . カリウム¹⁾

(1) 試薬

・ 1N 塩酸²⁾

・ カリウム標準原液

塩化カリウム (特級) を 500 ~ 600 で 40 ~ 60 分間加熱し³⁾，デシケーター中で放冷後，その 1.907g を水に溶かして 1L にし，樹脂びんに保存する。

この溶液 1ml は K^+ を 1mg 含む。

・ カリウム標準溶液⁴⁾

カリウム標準原液を薄めて 0 ~ 6mg / L の標準溶液系列を調整する。

(2) 試験操作

粉碎試料を玄米で 0.1g, 白米で 0.5g⁵⁾ を精秤し, 1N 塩酸 50ml を加えて 12 時間以上放置後⁶⁾, ろ紙を用いてろ過する。

最初の 10ml を捨て⁷⁾, その後得られたろ液を用い, 蛍光分析又は原子吸光分析法⁸⁾ によりそのカリウム含量を測定した値を a mg/L とし⁹⁾, 試料を入れずに同様に処理した塩酸液のカリウム含量を bmg/L, 試料白米水分を w% とすれば次式により粉碎試料中のカリウム含量 (mg/kg) を乾物換算して求められる¹⁰⁾。

$$\text{カリウム (mg/kg)} = \frac{(a-b) \times 50}{\text{粉碎試料 g 数}} \times \frac{100}{(100-w)}$$

1) 米のカリウム含量は玄米で 2500mg/kg 前後であるが, その分布は片寄り, 胚芽, 果皮, 種皮層に多い。したがって, 精米によって, 赤ぬかの段階である精米歩合 90% 程度までに激減し, さらに精米歩合 70% 程度までは徐々に減るが, その後の減少は余り認められない。精米歩合 70% の白米のカリウムは 300~500mg/kg 程度である。白米のカリウム含量は施肥量, 登熟度等に影響されるほか, 古米化したものは多い。

2) 抽出用の塩酸は, 精密分析用を用いる。

3) 結晶水や湿気を高温で加熱して飛ばし, 純粋な結晶にする。

4) 検量線用のカリウムは, 実際には研究会から配布したものを標準として使用すること。

5) 抽出る液のカリウム濃度が玄米, 白米とも 4mg/kg 前後になる。

6) 粉碎試料を 1N 塩酸に 12 時間浸漬すれば, カリウムは完全に抽出される。

溶出及びろ過に用いる際の容器, ロートは, すべてポリエチレン製を用いガラス製は用いない。

7) 最初の 10ml は, カリウムのろ紙への吸着, あるいはろ紙からの溶出等で濃度が安定しないので捨てる。手には汗, 汚れによりカリウムが付着しているのでよく洗浄するとともに, 試料液の触れるろ紙や器具類には素手でさわらないように注意する。(特に濾紙を折る際にはビニール製の手袋を用いるなどすること。)

8) 分析機器は特に機種を選定しない。分析機器のマニュアルに従って分析すればよい。

9) ろ液中のカリウムが 6mg/L を超えるときは, 適宜水で希釈し 6mg/L 以下にする。ただし希釈した時は, 希釈率で含量を補正する。

10) 計り採った粉碎試料中のカリウムが 1N 塩酸 50ml に溶出していることから求められる。

11. 分析データの取扱

酒米研究会で行う全国統一分析においては, これらの分析は精米を除き, すべて 2 連で行い, 分析値は下記に示す許容範囲に収まるようにし, その平均値をもって測定値とする。

なお, 粗蛋白質とカリウムは乾物重量当たりであるから留意すること。

分析項目	千粒重	水分	真精米歩合・碎米率・無効精米歩合	吸水性	蒸米吸水率	Brix	F・N	粗蛋白質	カリウム
表示最小桁	0.1(g)	0.1(%)	0.1(%)	0.1(%)	0.1(%)	0.1(%)	0.1(ml)	0.1(%)	1(ppm)
ばらつき許容範囲(%)	1.0(玄米) 1.5(白米)	1.5	5	5	5	5	5	5	5

【参考文献】

この分析法を整理するにあたって、昭和51年の統一分析法制定以来の事務局からの分析法に関する種々の連絡文書の関連箇所について付記するとともに次の文献を参考とした。

- 1) 吉澤 淑：「原料米の分析法（1）」，醸協，p656，77（1972）
- 2) 吉澤 淑：「原料米の分析法（2）」，醸協，p798，77（1972）
- 3) 注解編集委員会：「第4回改正国税庁所定分析法注解」，財団法人日本醸造協会（1993）